

Введение энтерального питания: насос Infinity

Дополнительную информацию см. в буклете «Руководство по энтеральному питанию для пациентов».

Данная информация не предназначена для использования вместо профессиональных рекомендаций. Поэтому выполняйте рекомендации своего врача, медсестры, фармацевта или диетолога в отношении вашей терапии.

Данные инструкции описывают основные действия по введению энтерального питания. Более подробные инструкции см. в кратком справочном руководстве по использованию насоса Infinity.



Рис. 1



Рис. 2

С чего начать

- Подготовьте чистое рабочее место.
- Тщательно вымойте руки теплой водой и мылом в течение **20 секунд** (если мыло и вода недоступны, используйте антисептик для рук на спиртовой основе).
- Вытрите руки насухо чистым полотенцем.

1 | Подготовка к зондовому питанию в домашних условиях

- A. Подготовьте смесь и принадлежности, разместив их на чистом рабочем месте (см. рис. 1).
- B. Проверьте срок годности на картонной коробке со смесью и убедитесь, что название смеси совпадает с тем, что назначил ваш врач. Перед открытием протрите коробку сверху чистой тканевой салфеткой и хорошо встряхните.

Открытые картонные коробки со смесью следует немедленно закрыть и убрать в холодильник. Продукт не должен находиться в пакете в течение более чем **12 часов** (если используется разведенный порошок, он не должен находиться в пакете в течение более чем 4 часов). Используйте или выбросьте открытую смесь в течение **24 часов** или действуйте в соответствии с рекомендациями производителя.

- C. Перед началом введения постелите полотенце на колени, так как смесь может пролиться во время введения.
- D. Сядьте прямо или приподнимите изголовье вашей кровати не менее чем на 30–45 градусов. **НЕ** лежите ровно на спине во время введения питания и по крайней мере в течение одного часа после этого.

2 | Введение питания через зонд

- A. Удерживая пакет для смеси в вертикальном положении, откройте крышку и влейте в него назначенное количество смеси. После этого надежно закройте пакет крышкой (см. рис. 2).
- B. Включите насос, нажимая и удерживая кнопку «ON/OFF» («ВКЛ./ВЫКЛ.») в течение 1.5 секунд (см. рис. 3).
- C. Нажмите кнопку «RATE/DOSE» («СКОРОСТЬ/ДОЗА»), чтобы вывести на экран функцию «RATE» («СКОРОСТЬ»), и установите необходимую скорость, используя кнопки «+» и «-». Скорость — это объем, который будет вводиться в течение каждого часа.
- D. Нажмите кнопку «RATE/DOSE» («СКОРОСТЬ/ДОЗА»), чтобы вывести на экран функцию «DOSE» («ДОЗА»), и установите необходимую дозу, используя кнопки «+» и «-». Доза — это общий объем.

Взрослые могут установить значение «бесконечно» («INF») — это означает, что конкретная доза не будет установлена. **НЕ** рекомендуется устанавливать значение «бесконечно» для детей.



Введение энтерального питания: насос Infinity



Рис. 3

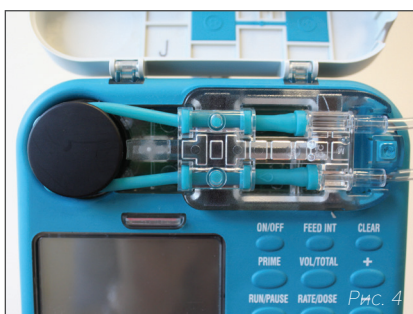


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

- Е.** Заправьте кассету бирюзового цвета в насос, слегка растянув петлю и натянув ее на рабочее колесо насоса (см. рис. 4), после чего закройте крышку насоса. Снимите пластиковый колпачок с конца системы (см. рис. 5).
- Ф.** Нажмите и удерживайте кнопку **«PRIME» («ЗАПОЛНИТЬ»)**, чтобы заполнить систему. Отпустите кнопку, как только смесь дойдет до конца трубки. Для ручного заполнения системы слегка нажмите на пакет, перевернув его вверх дном. Одновременно слегка пережмите пальцем трубку на месте значка **⚡**, чтобы удалить воздух и позволить смеси заполнить трубку.
- Г.** Если у вашего зонда есть зажим, убедитесь, что он находится в закрытом положении, прежде чем открывать заглушку на его конце. Если у вашего зонда нет зажима, перед снятием заглушки на его конце пережмите трубку пальцами.
- Н.** Снимите колпачок с зонда, откройте зажим и медленно промойте зонд водой (см. рис. 6).
- И.** Соедините конец трубки, идущей от пакета со смесью, с зондом. Чтобы начать вводить питание, нажмите кнопку **«RUN/PAUSE» («ПУСК/ПАУЗА»)**.
- Ж.** После окончания сеанса питания отсоедините трубку, идущую от пакета со смесью, и медленно промойте зонд водой, используя шприц.
- К.** Закройте конец зонда. Закройте зажим.
- Л.** Выключите насос, нажимая и удерживая кнопку **«ON/OFF» («ВКЛ./ВЫКЛ.»)** в течение 1.5 секунд.
- М.** Тщательно ополаскивайте пакет для смеси теплой водой между кормлениями.

Один пакет для смеси рассчитан на использование в течение 24 часов.

График кормления	
Название(-я) смеси(-ей):	
Целевое количество/день:	
Целевая скорость:	
Интервал/частота:	
Дополнительные примечания:	

Промывание водой

Промывание водой необходимо для того, чтобы избежать обезвоживания и закупорки системы.

- Для медленного промывания системы слегка теплой водой используйте шприц объемом 60 мл.
- Промывайте _____ мл воды до и _____ мл после кормления.
- Ежедневно дополнительно промывайте _____ мл воды.

Никогда не прикладывайте избыточную силу при промывании системы.

Советы для успешного питания

- **НЕ** вводите питание в случае расстройства желудка или рвоты.
- Если появилось неприятное чувство распирания, снизьте скорость или прекратите введение питания на один час.
- **НЕ** вводите в систему ничего, кроме смеси или воды, если ваш поставщик медицинских услуг не дал иных четких указаний.

Со всеми вопросами
и проблемами обращайтесь
к медсестре или врачу



Ваша группа медицинских специалистов из Option Care Health готова предоставить помощь по телефону в режиме 24/7/365.

Чтобы посмотреть видеоруководства или ознакомиться с дополнительными учебно-просветительскими ресурсами, посетите веб-сайт optioncarehealth.com/education.

Отделения Option Care Health аккредитованы Комиссией по аккредитации медицинских учреждений (Accreditation Commission for Health Care, ACHC). Номера организаций по медицинскому обслуживанию на дому (Home Health Agencies, ННА) можно посмотреть на веб-сайте optioncarehealth.com.

© Option Care Health, Inc. 2021 г. Все права защищены. 200CH11023